

N 1104 CLASSIC

ELECTROTERAPIA

O. RUSAS + O. CUADRADAS + T.E.N.S.

100% DIGITAL - 26 PROGRAMAS - 4 canales



2 AÑOS DE
GARANTÍA
+ CAPACITACIÓN

EL EQUIPO MÁS MODERNO DEL MERCADO

Pensado para uso profesional, el N 1104® permite modificar parámetros en sus Ondas Rusas, Cuadradas y T.E.N.S. para ser adaptadas a las necesidades y tratamiento adecuado.

El equipo N 1104® Classic posee cuatro salidas independientes y 26 programas desarrollados bajo los últimos estándares para su uso en electroestimulación. Gracias a sus corrientes bifásicas (farádicas) no genera acostumbamiento muscular, permitiendo a través de una sencilla programación tonificar, modelar, afirmar y relajar cualquier músculo del cuerpo.

TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA

Su tecnología, al igual que toda la desarrollada por NOTO® para sus equipos está basada en microelectrónica, lo que le confiere al equipo excelentes prestaciones de uso, estabilidad y confiabilidad, sumando mayor seguridad, durabilidad y confort al paciente.

UN EQUIPO DIFERENTE

Construido en un gabinete metálico, su manejo es 100% digital, con cables de inyección siliconados e identificación por colores para una mejor visualización, virtudes que le permiten al N 1104® ser un equipo diferente, brindando resultados visibles, calidad en tratamientos, confort al paciente y seguridad en uso.

NOTO plantea un rumbo diferente, donde la combinación de terapias, la incorporación de tecnología de vanguardia y la utilización de materiales y productos de primera calidad son requisitos en la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos.

ONDAS RUSAS

Se trata de corrientes de media frecuencia modulada en señales de baja frecuencia. Su frecuencia media tiene como objetivo la disminución de la resistencia o impedancia cutánea, permitiendo que la de baja frecuencia actúe sobre la musculatura. El objetivo de estas corrientes se centra en la tonificación muscular o en la modelación de los contornos corporales.

T.E.N.S.

Los programas T.E.N.S. utilizan los mecanismos propios del sistema nervioso central para aplacar los dolores crónicos y agudos. La ventaja principal de aplicar ondas T.E.N.S. es la disminución del dolor, generando un alivio de forma inmediata y sin efectos colaterales.

ONDAS CUADRADAS.

Se presentan en forma de pulsos de baja y media frecuencia. Las ondas cuadradas son las más energéticas de las corrientes rítmicas.

PRINCIPALES INDICACIONES:

- Flaccidez y modelación de contornos musculares.
- Levantamiento e hipertrofia de glúteos.
- Hipertrofia muscular progresiva.
- Atrofia por desuso.
- Fortalecimiento en procesos post quirúrgicos.
- Rehabilitación deportiva.

PRINCIPALES INDICACIONES:

- Lesiones de los nervios periféricos.
- Lesiones de compresión nerviosa y distrofia simpática refleja (síndrome del túnel carpiano).
- Dolor del muñón y/o dolor fantasma de miembros.
- Neuralgia post herpética.
- Dolor de espalda y cuello

PRINCIPALES INDICACIONES:

- Entrenamiento funcional.
- Deportología.
- Modelación.
- Firmeza muscular.
- Tonificación.
- Drenaje linfático.
- Fortalecimiento.
- Modelación corporal.
- Fuerza y Resistencia.

EL EQUIPO N 1104 CUENTA CON:



4 Electrodes GRANDES

4 Electrodes CHICOS

6 Bandas elásticas

4 Cables conectores


1 Manual de uso

DATOS TÉCNICOS N 1104:

FABRICADO POR:	NOTO GROUP S.A.
PAÍS:	ARGENTINA
NOMBRE DEL PRODUCTO:	N 1104
ANCHO:	185 MM
LONGITUD:	260 MM
ALTURA:	130 MM-75 MM
PESO:	2,1 KG
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	98 A 240 VAC 50/60HZ
POTENCIA:	21 WATT
FUSIBLE:	1 AMPER CORTE RÁPIDO
FUNCIONAMIENTO:	MICROCONTROLADOR
FORMAS DE ONDA:	ONDAS RUSAS, T.E.N.S Y CUADRADAS
CORRIENTE MÁXIMA:	90 MA .IMPEDANCIA 1K
CANTIDAD DE CANALES:	4 CORPORALES INDEPENDIENTES AISLADOS

PROGRAMAS:	26 PREESTABLECIDOS
TEMPORIZADOR (TIEMPO):	1 A 30 MINUTOS
CONTRACCIÓN:	2 A 15 SEGUNDOS
PAUSA:	2 A 50 SEGUNDOS
FRECUENCIA:	2 A 150 HZ
RELACIÓN:	1:1 - 2:1 - 4:1
RAMPA DE ASCENSO:	1 SEGUNDO
RAMPA DE DESCENSO:	1 SEGUNDO
SECUENCIAS:	1,2,3,4

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

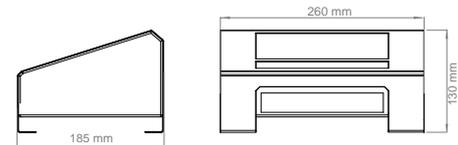

FRECUENCIA PORTADORA 2500 HZ. ONDAS RUSAS.

Nota respalda a todos sus clientes con un conjunto de herramientas disponibles en todo momento.

Herramientas como capacitación, servicio técnico post venta y repuestos asegurados. Todo esto con el objetivo de lograr que los equipos Noto sean siempre su mejor opción.

OTROS EQUIPOS DE LA LINEA N DE NOTO:

- N 1800** - MICRODERMOABRASIÓN + ELECTROPORACIÓN CON SISTEMA "ID".
- N 1400** - MICRODERMOABRASIÓN.