



Permite aplicar diferentes ondas y programas
en 2 grupos musculares al mismo tiempo

O. RUSAS + O. CUADRADAS + T.E.N.S.



2 AÑOS DE
GARANTÍA
+CAPACITACIÓN

TECNOLOGÍA DE PUNTA
EQUIPO PROFESIONAL

- EQUIPO BIFÁSICO
- PANTALLA DIGITAL
- 4 CANALES INDEPENDIENTES
- ARRANQUE Y FINALIZACIÓN EN RAMPA
- 1 CONTROL DE POTENCIA POR CANAL
- ELECTRODOS 100% CONDUCTIVOS

EL EQUIPO MÁS MODERNO DEL MERCADO.

El equipo N 1108 Progressive® es el más avanzado de la línea de equipos para electroestimulación estética, fisioterapia, deportología y rehabilitación.

Posee la versatilidad de trabajar con 8 canales de salidas o seleccionar su desempeño para trabajar 4 canales en un grupo muscular y los otros 4 canales para otro grupo muscular, en forma conjunta, al mismo tiempo y con diferentes ondas y programas.

Esta función, única en el mercado, permite al profesional trabajar diferentes zonas del cuerpo del paciente, al mismo tiempo, atendiendo la necesidad de la terapia a aplicar en cada zona corporal.

TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA.

Sus 8 canales operan en forma independiente o conjunta, con un transformador de aislamiento independiente por canal.

Con 54 programas especialmente desarrollados por profesionales le brindan al N 1108 Progressive® todas las posibilidades para la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos utilizando Ondas Rusas, Cuadradas y T.E.N.S. con inicio y finalización en rampa.

Además puede variar de forma rápida y segura todos los parámetros, generar y grabar nuevos programas y así tener un seguimiento de cada paciente.

¡BIENVENIDO A LA TECNOLOGÍA! BIENVENIDO A NOTO.

NOTO
LA DIFERENCIA DE SER ÚNICO

Con el lanzamiento de la línea N de NOTO se plantea un rumbo diferente para el mercado de la estética, un nuevo escenario en donde la combinación de terapias, la incorporación de tecnología de punta y la utilización de materiales y productos de primera calidad son fundamentales para la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos.

ONDAS RUSAS

Se trata de corrientes de media frecuencia modulada en señales de baja frecuencia. Su frecuencia media tiene como objetivo la disminución de la resistencia o impedancia cutánea, permitiendo que la de baja frecuencia actúe sobre la musculatura. El objetivo de estas corrientes se centra en la tonificación muscular o en la modelación de los contornos corporales. EL N 1108 Progressive cuenta con la posibilidad de trabajar este tipo de onda en forma bipolar y tetrapolar interferencial.

T.E.N.S.

Los programas T.E.N.S. utilizan los mecanismos propios del sistema nervioso central para aplacar los dolores crónicos y agudos. La ventaja principal de aplicar ondas T.E.N.S. es la disminución del dolor, generando un alivio de forma inmediata y sin efectos colaterales.

ONDAS CUADRADAS.

Se presentan en forma de pulsos de baja y media frecuencia. Las ondas cuadradas son las más energéticas de las corrientes rítmicas.

PRINCIPALES INDICACIONES:

- Flaccidez y modelación de contornos musculares.
- Levantamiento e hipertrofia de glúteos.
- Hipertrofia muscular progresiva.
- Atrofia por desuso.
- Fortalecimiento en procesos pos quirúrgicos.
- Rehabilitación deportiva.

PRINCIPALES INDICACIONES:

- Lesiones de los nervios periféricos.
- Lesiones de compresión nerviosa y distrofia simpática refleja (síndrome del túnel carpiano).
- Dolor del muñón y/o dolor fantasma de miembros.
- Neuralgia post herpética.
- Dolor de espalda y cuello

PRINCIPALES INDICACIONES:

- Entrenamiento funcional.
- Deportología.
- Modelación.
- Firmeza muscular.
- Tonificación.
- Drenaje linfático.
- Fortalecimiento.
- Modelación corporal.
- Fuerza y Resistencia.

EL EQUIPO N 1104 PROGRESSIVE CUENTA CON:


				
4 Electrodes GRANDES	4 Electrodes CHICOS	6 Bandas elásticas	4 Cables conectores	1 Manual de uso

DATOS TÉCNICOS N 1104 PROGRESSIVE:

FABRICADO POR:	NOTO GROUP S.A.
PAÍS:	ARGENTINA
NOMBRE DEL PRODUCTO:	N 1104 PROGRESSIVE
ANCHO:	185 MM
LONGITUD:	260 MM
ALTURA:	130 MM-75 MM
PESO:	2,1 KG
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	98 A 240 VAC 50/60HZ
POTENCIA:	21 WATT
FUSIBLE:	1 AMPER CORTE RÁPIDO
FUNCIONAMIENTO:	MICROCONTROLADOR
FORMAS DE ONDA:	ONDAS RUSAS, T.E.N.S Y CUADRAS
AMPLITUD DE PULSO:	0 A 90 MA . IMPEDANCIA 1K
CANTIDAD DE CANALES:	4 CORPORALES INDEPENDIENTES AISLADOS +1 FACIAL

PROGRAMAS:	26 PREESTABLECIDOS
TEMPORIZADOR (TIEMPO):	1 A 30 MINUTOS
CONTRACCIÓN:	2 A 15 SEGUNDOS
PAUSA:	2 A 50 SEGUNDOS
FRECUENCIA:	2 A 150 HZ
RELACIÓN:	1:1, 2:1 4:1
RAMPA DE ASCENSO:	1 SEGUNDO
RAMPA DE DESCENSO:	1 SEGUNDO
SECUENCIAS:	1,2,3,4

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

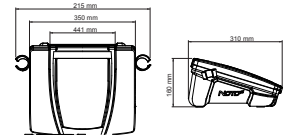

FRECUENCIA PORTADORA 2500 HZ. ONDAS RUSAS.

Noto respalda a todos sus clientes con un conjunto de herramientas disponibles en todo momento.

Herramientas que van desde el servicio técnico y de post venta hasta nuestros cursos de tratamientos y apoyo en marketing. Todo esto con el objetivo de lograr que los equipos Noto sean siempre su mejor opción.

OTROS EQUIPOS DE LA LINEA N DE NOTO:

TRIMAX - RADIOFRECUENCIA TRIPOLAR CON CONTROL Y SENSOR DE TEMPERATURA.
CAV 47 - CAVITACIÓN DE SELECCIÓN DE FRECUENCIA VARIABLE.